


Modulateur Gariaiev-Michine Mode d'emploi

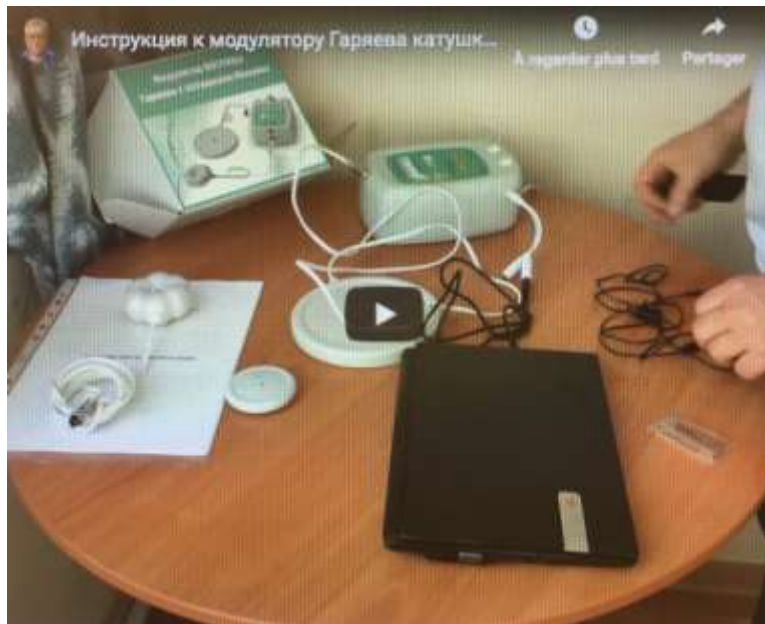

Prescription du « modulateur Gariaiev Michine

L'appareil de physiothérapie « Modulateur Gariaiev Michine » est destiné à la mise en œuvre de procédures de médecine ondulatoire linguistique. L'appareil produit un effet régénératif par une résonnance particulière entre un champ physique organisé et le corps humain.

Les principes de la Génétique Linguistique Ondulatoire sont directement liés avec ce qu'on appelle les effets de champs de torseurs, qui remplissent dans le corps humain d'importantes fonctions de régulation. Nous avons réussi à les mettre en œuvre dans les appareils de Michine, dont travail est fondé sur l'utilisation des propriétés d'un champ électrostatique à pénétrer à l'intérieur de formations pathogènes et de les détruire. Les deux technologies, en se complétant, ont permis de créer l'appareil modulateur de la matrice de Gariaiev, équipé des bobines de Michine. Cet appareil parvient à restaurer l'état de l'être humain (mais aussi de tout être vivant) jusqu'à la normalité. Comme il se forme continuellement dans l'organisme des zones au métabolisme défectueux, qu'il s'y accumule des erreurs dans la synthèse des protéines, des problèmes de santé vont obligatoirement survenir. Les courants tournants de l'équipement de Michine sur lequel sont envoyés des courants analogiques de l'équipement de Gariaiev, se renforcent mutuellement. Le champ créé par les bobines de Michine est modulé par les matrices de Gariaiev.

Les méthodes de la médecine des courants tournants de Michine sont fondées sur les conclusions de savants connus du siècle précédent : Nicolas Tesla et ses successeurs, l'académicien français Arsène d'Arsonval, son élève Georges Lakhowsky et le médecin, savant et chercheur américain Royal Raymond Raïf. Ils étaient à l'origine de la théorie de l'oscillation cellulaire : l'effet positif de la résonnance des champs électriques dans la restauration du potentiel de l'enveloppe cytoplasmique. Ce phénomène a longtemps été ignoré par la pratique médicale à cause des limitations technologiques. À partir de 2016 le système de thérapie par résonnance électrique s'est développé pour devenir la physiothérapie par champs électriques (PPCE) et elle a eu une large diffusion. Dans la présente application la PPCE se déroule avec l'utilisation d'inducteurs électriques développés par Alexandre Michine (une bobine de forme de disque et une bobine en forme de tore). Ces inducteurs sont appliqués en diverses parties du corps. À la base de la médecine par courants tournants se trouve la création des conditions pour enclencher les mécanismes d'autorégulation. Les effets de cette thérapie ont un caractère de durabilité : l'organisme est capable de se souvenir de l'interaction reçue pendant une longue durée.

La conductivité des membranes cytoplasmiques change lorsque l'état cellulaire est anormal. Le potentiel des membranes diminue. Cela entraîne une perturbation de l'état normal de l'être humain. L'application de l'interaction à résonnance du modulateur de Gariaiev Michine apporte une normalisation de l'état de polarisation des cellules, des tissus et des organes. Le potentiel des membranes cellulaires s'accroît. Les cellules affaiblies sont rechargées pour longtemps, et les cellules qui ont dégénéré peuvent se rétablir. Le système immunitaire est réactivé. Les cellules relancent des processus énérgo-informationnels qui induisent une régénération de l'organisme.

L'action du modulateur est indolore et ne produit pas d'effets secondaires. Le patient peut procéder à ce traitement en position relaxée, assise ou couchée. Les vêtements ne gênent pas le fonctionnement de l'appareil. Le patient peut mener une vie active après la séance. Après cette thérapie les patients deviennent plus énergiques, plus vigoureux et heureux de vivre. Ils reçoivent une charge supplémentaire d'énergie vitale.

L'usage du modulateur est également utile aux personnes en bonne santé. Son utilisation accroît le tonus vital et contribue au rajeunissement de l'organisme. Ce n'est pas seulement une méthode de soin de nombreuses maladies : l'action du modulateur produit une interaction prophylactique et assainissante.

Organisation et principe de fonctionnement de l'appareil

L'appareil pour la médecine linguistique et ondulatoire (figure 1) est un équipement de faible encombrement, réalisé dans un boîtier en plastique solide. L'intérieur contient un microprocesseur qui pilote l'appareil, un générateur d'ondes sinusoïdales qui est relié aux câbles extérieurs conduisant aux bobines rayonnantes de Michine.



Sur le boîtier se trouve un bouton de marche-arrêt à voyant (1), une touche de choix de puissance (2) (0 indique 50% de puissance, 1 équivaut à 100%), des boutons de sélection du minuteur avec voyants (3). Les durées respectives sont : 15, 30, 60 minutes, et un régime continu. Le voyant (6) indique la présence du champ. Une prise coaxiale permet de connecter la bobine de Michine (4), et une entrée de jack permet de connecter la source du signal de modulation de la matrice de Gariaiev (5) qui peut être tout lecteur WAV ou MP3.

Pendant le traitement on agit à l'aide du champ du disque ou du tore, selon la structure de l'organe lésé. Il est recommandé d'utiliser le disque pour traiter des organes creux (les organes de grande cavité, le thorax, la tête). Le tore est préférable pour structures osseuses et musculaires (les articulations, les tendons, les muscles, les zones reflexes).

Au début du travail il est recommandé de se limiter à 15 minutes de traitement. Puis la personne détermine d'elle même la durée convenable, selon les perceptions qu'elle va ressentir par l'usage du rayonnement de la bobine.

Lors d'un traitement intense, l'interaction peut durer une heure. Lors d'un traitement prophylactique le traitement sera limité à 15 à 30 minutes, et à un jour d'intervalle. La durée est sélectionnée à l'aide du minuteur (3). Après la mise sous tension du modulateur, et le choix de la durée,

le voyant correspondant s'allume, suivi d'un signal sonore. Un signal sonore indique la fin de la période sélectionnée.

Pendant le traitement on peut déplacer le disque ou le tore sur la zone à traiter.

On peut réduire la durée dans le cas d'une sensibilité élevée au champ induit par la bobine.

Le modulateur est fourni avec deux matrices universelles de Gariaiev : (« Immunité » et « Purification de l'organisme »). Nous recommandons d'acquérir avec le modulateur, des matrices individuelles de Gariaiev, pour une plus grande efficacité du traitement.

Le modulateur peut servir non seulement pour la restauration de la santé humaine, mais aussi en élevage et en agriculture.

Séquence de travail au modulateur

Branchez l'appareil au secteur 220v. Mettez l'appareil sous tension avec la touche (1). L'indicateur bleu doit s'allumer, indiquant que l'appareil est sous tension.

Connectez à l'appareil la bobine de votre choix. Pour cela engagez le connecteur du câble de bobine dans le connecteur (5) du boîtier. À l'aide du bouton (2) choisissez la puissance de fonctionnement de la bobine (min-max). Branchez la sortie audio de votre source de matrice Gariaiev (votre ordinateur contenant la matrice, ou votre iPhone ou un lecteur MP3) sur l'entrée de signal de modulation (6).



Sélectionnez la période de fonctionnement convenable avec les sélecteurs (3). Un indicateur bleu vous indique quelle est la durée sélectionnée : 15', 30', 60' ou bien sans limite. Lorsque vous branchez la bobine, le voyant rouge « absence de champ » doit s'éteindre.

Vous pouvez utiliser la présence de champ au niveau de la bobine à l'aide du détecteur de champ autonome (8) figure 2, qui est fourni dans le kit du modulateur.

VOTRE ATTENTION svp ! Avant le premier branchement des bobines il est souhaitable d'essayer chaque bobine à l'aide d'une serviette humide. Pour ce faire, la bobine doit être débranchée. S'assurer qu'elle est bien sèche avant de la connecter.

Recommandations d'application du modulateur

Résultats de l'application du rayonnement du modulateur

- produit des effets de guérison durables ;
- rétablit la mobilité des articulations et de la colonne vertébrale ;
- améliore la circulation sanguine et le nourrissage des tissus ;
- contribue à l'oxygénation des cellules ;
- contribue au drainage lymphatique et veineux ;
- accroît l'immunité ;
- arrête la progression des maladies ;
- rétablit un sommeil réparateur ;

- élève le seuil de sensibilité à la douleur ;
- abaisse la sensibilité aux allergies ;
- atténue les démangeaisons ;
- effet anti-inflammatoire et antibactérien ;
- accroît le tonus et l'aspect de la peau ;
- protège le cerveau de la sous-oxygénation ;
- diminue la surexcitabilité du système nerveux ;
- effet tranquillisant ;
- contribue à la réduction de la quantité de médicaments absorbés ;
- dynamise l'eau potable : (on peut placer les bouteilles d'eau potable dans le champ d'une bobine active de Michine) ;
- accroît l'énergie vitale ;
- supprime les dérèglements fonctionnels divers ;

Prescriptions du modulateur

- Névralgies ;
- Névrites ;
- Perturbations de la sensibilité (Hypoesthésie, Paresthésie) ;
- Ostéochondrose de la colonne vertébrale ;
- Radiculite ;
- Migraines ;
- Névroses ;
- Insomnies ;
- Dystonie neurocirculatoire ;
- Enurésie ;
- Névrodermite ;
- Acné ;
- Diathèse exsudative ;
- Dermatose à démangeaisons ;
- Infiltrats inflammatoires ;
- Hypersécrétion des glandes salivaires ;
- Cellulite ;
- Ulcérations trophiques ;
- Varices ;
- Infection bactérienne de la peau et mycoses ;
- Infections ORL ;
- Inflammation des muqueuses buccales ;
- Rhinite vasomotrice ;
- Sinusite maxillaire chronique ;
- Maladies vénériennes ;
- Prostatite ;
- Inflammation des organes génitaux de la femme ;
- etc.

Prescriptions délicates

- en cas de présence d'un stimulateur cardiaque ;
- en cas de grossesse ;
- éviter l'utilisation du modulateur à proximité d'autres appareils électroniques.

VOTRE ATTENTION svp !

°Ne pas arrêter les traitements médicaux en cours.

°Éloigner tout objet métallique de la zone de rayonnement de la bobine de Michine en cours de fonctionnement. Les objets métalliques déforment le champ électrique et peuvent annuler les effets positifs des bobines.

°Les patient équipés d'un stimulateur cardiaque doivent savoir que les champs électriques peuvent décharger la batterie de leur stimulateur. C'est pourquoi il est souhaitable de réaliser ce traitement sous surveillance dans une clinique.

°L'appareil n'a pas de contrindications ni d'effets secondaires. Il est absolument inoffensif.

°Il est inutile de poser les bobines en contact avec la peau nue. Les champs électriques traversent les vêtements sans atténuation.

°faites régulièrement la procédure d'interaction sur les reins, même si vous êtes certains de leur fonctionnement normal. Préparez vos reins à une élimination massive des déchets, consécutive aux effets de l'appareil sur l'organisme.

°Soyez constamment à l'écoute de votre corps durant les séances de régénération. Les sensations peuvent apparaître en différents points du corps, indépendamment du point d'application du modulateur. Cela peuvent être des picotements, des pulsations, des impressions de pesanteur ou autre chose. Il faut veiller à ce qu'elles ne soient pas excessives et encore moins douloureuses. Dans le cas contraire il faut arrêter immédiatement la séance.


°Le choix de la durée de séance est approximatif et doit être sélectionné personnellement par le patient. Le temps doit être rectifié en fonction de comportement de l'organisme. La durée sera celle que vous aurez choisie pour pouvoir supporter le traitement sans désagréments. Il faut noter qu'une puissance trop faible et une durée trop courte du traitement vont rallonger le délai d'apparition des résultats attendus. Mais une interaction d'intensité maximale risque de provoquer une accélération de la réaction, avec une élimination trop rapide des déchets par l'organisme. Ceci peut induire des sensations désagréables et même être nuisible. Les reins seront débordés par l'afflux massif de toxines. Certains patients ne sentent aucun désagrément, alors que d'autres vont si mal, qu'ils doivent repousser les séances de plusieurs jours. Ne continuez les traitements que si vous pouvez supporter des séances de 15' à 30' le matin et le soir, sans inconfort notable.

°Lorsque la production des ferments stomacaux et intestinaux est perturbée, l'induction des bobines peut provoquer un goût métallique dans la bouche. Cette sensation va disparaître au bout d'un mois de traitement.

Positionnement commun à tous, de la bobine de Michine

Il est utilisé pour un diagnostic préalable de l'organisme.


Mais il faut se souvenir que les bobines peuvent être placées en tout point du corps.

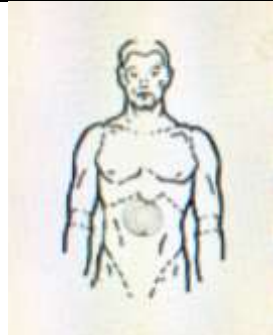

Première zone d'emplacement des bobines en forme de disque :

La zone du nombril.

L'interaction peut durer **30 minutes, en augmentant jusqu'à une heure**, selon la perception du patient.

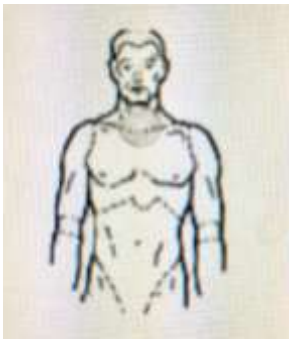


Seconde zone d'emplacement des bobines en forme de disque :

La zone de la thyroïde.

L'interaction peut durer **entre 15 et 30 minutes**, selon la perception du patient.

Le patient doit sentir et déterminer par lui-même la durée de la séance convenable pour son organisme.

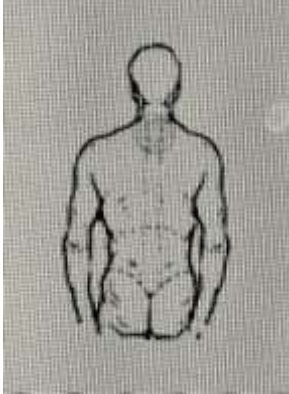

Troisième zone d'emplacement des bobines en forme de disque :

La zone du cou du côté du dos, au niveau de la 7^{ième} vertèbre.


L'interaction peut durer **entre 15 et 30 minutes**, selon la perception du patient.

Il est important de placer la bobine de manière à couvrir la zone de la poitrine. Parce que entre la 7^{ième} vertèbre du cou et la 1^{ière} de la poitrine il se produit souvent une connexion des terminaisons nerveuses, ce qui entraîne des vertiges, des pertes de connaissance, un sentiment de pesanteur. Il se produit aussi une perturbation de l'irrigation du cerveau, et la sous oxygénation entraîne des migraines, des insomnies, et même une perte de mémoire, etc. Lors de l'utilisation des bobines, souvent le patient va s'endormir. Les connexions nerveuses se relâchent et l'oxygénation du cerveau s'améliore.

L'interaction peut durer **entre 15 et 30 minutes**, sur la 7^{ième} vertèbre du cou et la 1^{ière} de la poitrine selon la perception du patient. Si le patient se sent bien, il peut prolonger jusqu'à une heure.

Initialement on peut assister à une élévation de la tension artérielle, mais avec le temps celle-ci se stabilise. Il ne faut pas craindre cela, mais il vaut mieux commencer par une exposition limitée à **15 minutes**, afin de ne pas provoquer de forte saute de tension.

Faites une progression en commençant à **15 minutes** et en accroissant peu à peu, à condition qu'il n'y ait pas de désagrément aucun. Tout doit se dérouler calmement et dans le confort, sans sauts de la tension artérielle.

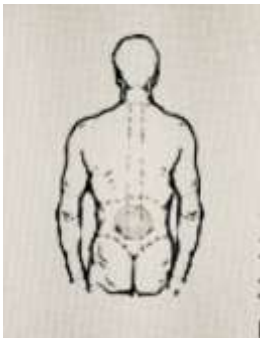

Quatrième zone d'emplacement des bobines en forme de disque : C'est la zone des reins.

Remarquons que la première zone, celle du nombril, où nous avons commencé le placement de la bobine, interagit sur tous les organes de l'abdomen : le reins, le pancréas, la rate, le duodénum, l'intestin, l'estomac, le foie. Sur cette zone nous avons donné la première impulsion à tous nos organes internes. N'oublions pas que nous avons aussi les surrénales qu'il faudra traiter obligatoirement depuis le dos. Très souvent, si nos reins sont en souffrance, alors la vessie va souffrir également. C'est la branche qui apporte de l'énergie à l'être humain et qui participe au métabolisme. C'est pourquoi l'interaction sur cette zone doit se faire séparément.

Nous installons la bobine en forme de disque sur la colonne vertébrale à la hauteur des basses côtes, pour **au moins 30 minutes**.

Un traitement plus long est possible, car il faut du temps pour que les concrétions détachées des reins aient le temps de descendre jusqu'à la vessie. Ce sont les femmes qui peuvent en souffrir, mais c'est surtout le problème des hommes.

Il se peut qu'apparaissent des douleurs dans les flancs, ou de la pesanteur, ou encore une douleur sourde. Pas de panique. Ces moments déplaisants disparaissent au bout de 2-3 jours. Dans ces cas il faut utiliser des préparations phytosanitaires de nettoyage des reins, de la vessie et des uretères.

Si des douleurs apparaissent lors de l'installation des bobines, n'essayez pas d'accroître brutalement le temps d'interaction : cela peut induire des effets négatifs.




Cinquième zone d'emplacement des bobines en forme de disque : C'est la zone de l'anus.

Nous posons la bobine disque à plat et nous nous asseyons dessus.

L'action sur cette zone est de **30 minutes, extensible à 1 heure**.

Le patient pourrait ressentir une lourdeur dans l'anus ou le rectum. Cela signifie qu'il va falloir utiliser la bobine en forme de tore.

La zone de l'anus est en relation avec le sacrum et le coccyx, car l'innervation vient de la colonne vertébrale. Comme à l'heure actuelle presque tout le monde souffre de chondrites et d'arthroses, il est possible qu'une aggravation de ces maladies ait lieu. Il ne faut pas craindre cela, car c'est parfaitement normal. Si des sensations étranges sont apparues cela désigne un problème d'organe. Il devient clair sur quoi il va falloir insister. Il se peut que dans des cas plus sévères de fortes douleurs et des spasmes aient lieu. Après la zone anale, nous passons aux extrémités inférieures.

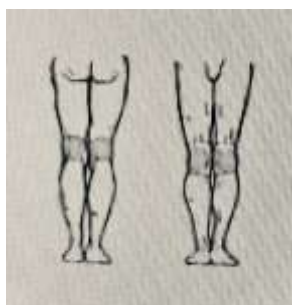

Sixième zone d'emplacement des bobines en forme de disque : C'est la zone des extrémités inférieures.

Il est très important de stimuler les jambes si vous constatez qu'elles faiblissent, qu'il y a une hypotrophie des muscles. Vous avez là deux systèmes réunis : système vasculaire et lymphatique. Les phénomènes de stagnation sont généralement observables dans les membres inférieurs.

L'action sur les membres inférieurs se réalise à l'aide des bobines discoïdes au niveau des genoux, entre les genoux et à l'arrière des genoux. Nous plaçons la bobine à l'arrière d'un genou, puis à l'arrière de l'autre. Il faut faire cela en position allongée.

Durée de **15 minutes**.

Puis on traite les plantes des pieds : Nous posons les deux pieds sur le disque. On peut faire cela en étant assis ou couché. En position couchée il faudra plier les genoux. Si vous avez de

l'arthrite ou des éperons, alors procédez d'abord à l'installation générale puis posez alternativement chaque pied sur le disque de bobine.

Il est souhaitable de procéder de façon symétrique, même si le membre n'est pas malade.

Si vous sentez qu'il y a des concrétions acides ou salées dans vos plantes des pieds, alors il est impératif d'installer la bobine sur chaque pied séparément. La plante du pied est l'endroit de la terminaison et du commencement des systèmes veineux et artériels. La circulation sanguine dans la plante du pied est responsable de nombreuses maladies des jambes.

Durée du traitement sur chaque pied : **15 minutes**.



En complément on peut conseiller de traiter la tête C'est la zone de la petite source.

Durée du traitement: **15 minutes**.

Après cela nous vous conseillons d'activer la zone de la première vertèbre, l'atlas. Nous posons la bobine au sommet du crâne. Cette installation renforce la circulation sanguine et l'alimentation du cerveau.

Durée du traitement: également **15 minutes**.

Ce traitement améliore le sommeil, supprime les migraines et la fatigue.

Bibliographie des travaux scientifiques

- P. P. Gariaiev Le génome linguistique et ondulatoire: Théorie et pratique (lingvistiko-volnovoi guénom : téoria i praktika); Institut de Génétique Quantique — Kiev, 2009 — 218c. (http://www.wavegenetics.org/Petr_Gariaev.pdf)
- A. N. Remizov. La physique médicale et biologique. (meditsinskaïa i biologitcheskaïa fizika)- Moscou, 1996.
- Yu. A. Kholodov, N. N. Lebedeva : Réaction du système nerveux de l'être humain aux champs électromagnétiques. (réactzia nervnoï sistémy tchélovéka na eletromagnitnyé polia.) - Moscou. 1991.
- V. O. Samoïlov, G. N. Ponomarenko, L. D.ieu Enine : la bioacoustique à basse fréquence. (Nizkotchastotnaïa bioakoustika)- Saint Petersburg, 1994.^{[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100]}
- J L Touraine; J Traeger; H Bé tuel; J M Dubernard; J P Revillard Cancer in Transplantation: Prevention and Treatment : Proceedings of the 27th Conference on Transplantation and Clinical Immunology, 22-24 May 1995 Dordrecht : Springer Netherlands, 1996
- Elizabeth Kirkpatrick Dilling, Georges Lakhovsky. The Secret of Life: Electricity, Radiation and Your Body, Noontide Press, 198
- Louis Chauvois D'Arsonval: soixante-cinq ans à travers la science, J. Oliven, 1937

- □ Gerald F. Foye, Royal R. Rife Humanitarian: Betrayed And Persecuted. New Century Press, 30 map. 2002 г.

Caractéristiques techniques du modulateur :

Modulateur Gariaiev Michine

Fréquence de sortie	200 à 450 kHz
Périodes de fonctionnement	15, 30, 60 minutes, continu
Fréquence du réseau 220v	50/60hz
Puissance max consommée	20VA
Classe électrique	Classe 1
Catégorie d'isolation électrique	IP54
Encombrement en mm	185x150x100
Conditions d'exploitation	+10 à +30°C, humidité < 80%

Kit de livraison du modulateur

1	L'appareil « modulateur Gariaiev Michine »	1 pièce
2	Bobines	2 pièces
3	Indicateur de champ	1 pièce
4	Câble audio mini jack 3,5mm	1 pièce
5	Manuel d'exploitation	1 pièce
6	Kit de programmes universels de Gariaiev	1 pièce
7	Tare d'emballage	1 pièce